

# 一、實驗架設與結果討論

## 1.1 相位調製對光強的影響

我們先以兩種方式去確認相位調製對光強的影響，第一種是用功率計 (power meter)，讓光一次通過兩台 EOM，去分別測量兩台同時開啟與關閉時的光強，再將兩個數值相除得到變化率；另一種方法是透過 Fabry-Perot 測量頻譜，比較相位調製前後的總面積大小，測量結果如下。

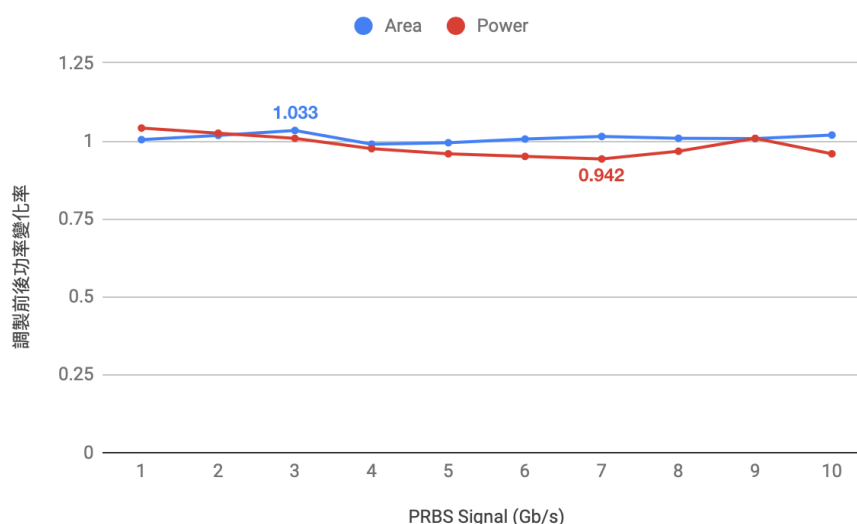


圖 1.1: EOM 開啟前後之功率變化率

從隨機訊號 1 Gb/s 到 10 Gb/s 的調製，看不出有特定的變化趨勢，可見展頻與壓縮只會影響頻率的分佈，不會明顯改變光強度。

## 1.2 古典光量測

古典光源為 Toptica 的半導體雷射，可產生波長 795 nm 的窄頻雷射，這部分的量測主要可以分成兩個部分，第一個部分是要測量雷射的頻譜，看相位調製如何影響頻率的分佈；另一部分是讓雷射通過鉀原子氣體管，調整入射雷射的頻率測量吸收譜。

### 1.2.1 雷射頻譜量測

實驗光路架設如圖，我們將窄頻雷射通過兩台 EOM 對其進行相位調製，第一台為展頻用，第二台用來做反向的調製來還原頻譜，再以 Fabry-Perot 干涉儀去掃頻。

待放圖片

圖 1.2: 雷射頻譜量測光路圖

在兩台 EOM 都關閉的情況下，可以測到波長 795 奈米窄頻雷射的頻譜，結果如圖，以此 Fabry-Perot 的解析度掃出的雷射頻寬約為 30 MHz。

若只開啟第一台 EOM，在 10 Gb/s 隨機訊號的調製下可將窄頻雷射光的頻譜展至 10 GHz 寬，但由於我們的使用的 Fabry-Perot FSR 僅 10 GHz，無法涵蓋完整的頻率區間，會使測量的結果失真，要想掃出完整展開的頻譜需使用 FSR 20 GHz 以上的干涉儀，所以下面會先以 2 Gb/s 的訊號來測試展頻的結果是否符合理論模擬。

# 待放圖片

圖 1.3: 窄頻雷射頻譜

## 1.2.1.1 2 Gb/s 隨機訊號之相位調製

先以 2 Gb/s 隨機訊號進行相位調製，只開啟第一台能將頻譜展至  $\pm 5$  GHz 寬，如下圖。

# 待放圖片

圖 1.4: 5 Gb/s 訊號之展頻頻譜

頻譜的形狀大致上與理論相符，但在  $\pm 2$  GHz 的位置有一個突起的訊號，這是由於隨機訊號的上升與下降時間不夠快所致，若在數值模擬中把隨機訊號加上約 30 ps 的上升與下降時間（如圖），則會出現類似的結果，如圖：

此外，還可看出該頻譜的包絡線有週期振盪的訊號，原因為我們使用的隨機訊號實際上是個重複出現的週期訊號，每個週期有  $2^{31} - 1$  個位元，若把單位週期的位元數調為  $2^{15} - 1$  做可看到週期更小的震盪週期，

待放圖片 待放圖片

(a) caption\_1

(b) caption\_2

如圖：

待放圖片 待放圖片

(a) caption\_1

(b) caption\_2

從測量的頻譜可以看出，展寬的頻率與理論計算的結果一致，所以我們認為 10 Gb/s 的隨機訊號能將訊號展至  $\pm 10$  GHz 寬。

#### 1.2.1.2 10 Gb/s 隨機訊號之相位調製

上一小節我們先以 2 Gb/s 的訊號做展頻的測試，是因為我們使用的 Fabry-Perot 干涉儀 FSR 不夠大，壓縮頻譜的部分則可重新使用 10 Gb/s 的訊號進行調製。

當兩台 EOM 同時開啟時，理論上要能將展寬的頻譜還原成調製前的狀態，但從（圖）的實驗結果可以看出，壓縮回來的頻譜與調製前相比，中心頻率的強度僅為本來的 70%，若只計算中心頻率附近 1 GHz 的頻率區間，與調製前相比，光強僅約 80%，剩下 20% 的能量還分散在其他頻率沒被還原。造成頻譜壓縮效果不佳的可能原因為，兩個隨機訊號的形狀不同，上下也不夠對稱，導致無法將相位做反向的調製，使訊號完美還原成最初的狀態。

# 待放圖片

圖 1.7: 10 Gb/s 訊號壓縮後頻譜

## 1.2.2 鉀原子吸收譜

為了確定相位調製對於鉀原子吸收的影響，我們在兩台 EOM 的後面放上一個如原子氣體管，並以光二極體 (Photodiode) 收光，測量透射的強度。只有在入射頻率與鉀原子要遷能接共振時光子才會被吸收，使透射率降低，所以若連續調整入射光的頻率，則能掃出整個吸收譜，如圖黑線。

# 待放圖片

圖 1.8: 調製後的鉀原子吸收譜

接著打開第一台 EOM，將頻寬從 30 MHz 展至 10 GHz，結果如上圖藍線，可見頻譜展寬之後，光能大部分透射鉀原子氣體不被吸收，就像隱形了一般，能降低光子與環境的影響。若同時開啟兩台 EOM 將頻譜壓，則能再次看到光被吸收，但吸收率卻明顯降低，原因如上一小節

所述，可能為隨機訊號品質不所致，影響頻譜壓縮的效果，有部分的能量還分散在各個頻率上沒能被還原，那些能量不在鉀原子的共振頻率上，所以能夠穿透氣體管，使穿透率上升。

## 1.3 單光子量測

雙光子在產生出來後會先進 PBS 將訊號分為 signal 和 idler，以 idler 做為觸發訊號，讓 signal 經過 EOM 與鉀原子氣體管，進行相位的調製與吸收。

這部分的實驗，我們將單光子 (signal) 的頻率調至鉀原子的躍遷頻率，使光子能被吸收，再藉由相位調製展寬光子的頻譜，降低原子對光子的影響，以達到隱形斗篷的效果。但由於單光子能量太弱，無法以 Fabry-Perot 干涉儀掃頻，所以為了要確定兩台 EOM 同時開啟時能否將頻譜還原，我們改用頻寬 60 MHz 的 Etalon 濾波器，限制光子能通過的頻寬，架設如圖。

# 待放圖片

圖 1.9: 單光子量測光路圖

### 1.3.1 展頻與壓縮

以（光路圖）的架設，先不要放  $^{87}\text{Rb}$  原子氣體管，讓單光子直接通過 60 MHz 寬的 Etalon 濾波器。若兩台 EOM 都沒開，窄頻的單光子

能完全通濾波器， $G^2(\tau)$  的量測結果如圖。此時若開啟第一台 EOM，將頻譜展至 10 GHz 寬，則單光子僅有極低的機率能通過 Etalon，如圖，幾乎測不到單光子的訊號。若同時開啟兩台 EOM，互補的隨機訊號能互相抵銷相位的變化，使頻譜還原至窄頻，如此就能使光子再次通過 Etalon，如圖，與未調製前的結果相比，強度低了些，這是由於壓縮效果不夠好，導致部分的光子沒能通過 Etalon 所致。

# 待放圖片

圖 1.10: nocell 調製比較圖

## 1.3.2 $^{87}\text{Rb}$ 吸收

同上一小節的光路架設，但把  $^{87}\text{Rb}$  原子氣體管放回光路上，如圖。兩台相位調製器都不開的話，單光子幾乎全部被吸收，如圖。若開啟第一台 EOM 將單光子頻譜展寬，雖然光子能幾乎不被吸收，但由於 Etalon 的過濾，探測器仍測不太到光子，如圖。若將第二台相位調製器也開啟，則能把單光子的頻譜壓縮，再通過 Etalon，如圖。

單獨將圖與圖拿出來比較 (圖)，同樣是測量展頻再壓縮回來的光，黑線為沒放鉀原子氣體管，紅線則有，從結果可看出，本來該被完全吸收的單光子，可透過相位的調製大幅降低鉀原子氣體的影響，讓部分的光可以穿透，並在頻譜還原後被探測，達到隱形斗篷的效果。

# 待放圖片

圖 1.11: heatcell 調製比較圖

# 待放圖片

圖 1.12: 調製後光子之鉀原子吸收比較圖